

emmi[®]DENT



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

emmi[®]-dent SLIM



Emmi Ultrasonic GmbH Gerauer
Strasse 34 64546
Moerfelden-Walldorf Germany Тел.:
+49 (0)6105
- 40 67 94 Електронна пошта:
info@emmi-dent.de

зі 100%
УЛЬТРАЗВУКОМ



emmi®-dent – Оригінал для інноваційного чищення зубів зі 100% оригінальною ультразвуковою технологією

Вітаємо вас із придбанням ультразвукової зубної щітки нового покоління з інтелектуальною головою!

Ці інструкції допоможуть вам отримати максимальну віддачу від вашої ультразвукової зубної щітки.

Комплект поставки

- 1х ультразвукова зубна щітка (наконечник)
- 1 зарядна станція + мережевий адаптер (USB-C)
- 2 інтелектуальні насадки-щітки
- 1х ультразвукова зубна паста

Перші кроки

1. розпакування та заряджання

Обережно вийміть ультразвукову зубну щітку та аксесуари з упаковки.

Помістіть ультразвукову зубну щітку на зарядну

станцію. Підключіть зарядну станцію до розетки та дайте зубній щітці повністю зарядитися (приблизно 24 години перед першим використанням).


Червоне світло: Ультразвукова зубна щітка заряджається.

Зелене світло: Ультразвукова зубна щітка повністю заряджена.

2. увімкнути/вимкнути

Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення (нижня кнопка) один раз протягом приблизно 0,5 секунди, щоб увімкнути ультразвукову зубну щітку.


Натисніть ту саму кнопку ще раз, щоб вимкнути зубну щітку.

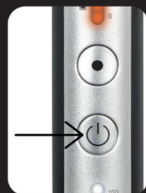

3. налаштуйте параметри

Зубна щітка має три різні режими

які можна вибрати за допомогою кнопки налаштування (верхня кнопка).

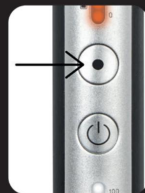

Режим 1:

Легка вібрація для чутливих зубів та ясен.

Режим 2:

Середня вібрація для здоров'я зубів і ясен.

Режим 3:

Сильна вібрація для збільшення потужності ультразвуку та швидкого очищення.

Натисніть кнопку налаштування, щоб перемикатися між режимами.

Кожен режим сигналізується різним світлодіодним індикатором:

Режим 1:


Жовте світло

Режим 2:

Фіолетове світло

Режим 3:

Бірюзове світло

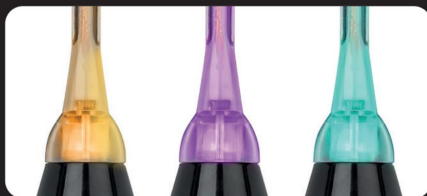

Інструкція із застосування

1. прикріпіть головку щітки

Міцно прикріпіть головку щітки до ручки зубної щітки (наконечника).

2. нанесіть зубну пасту

Нанесіть кількість ультразвукової зубної пасти розміром з горошину (ультразвукові зубні пасти емті DENT) до щетинок.

3. чищення зубів

Увімкніть ультразвукову зубну щітку, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення. Виберіть потрібний режим за допомогою кнопки налаштування. Інтелектуальна головка щітки запам'ятовує вибраний режим. Тримайте зубну щітку на зубах і рухайте нею від зуба до зуба кожні 6 секунд. Ви чутимете тактильний сигнал кожні 6 секунд, який допоможе вам змінити положення чищення. Чистіть зуби щонайменше три хвилини, рекомендовані стоматологами.

Прилад автоматично вимикається через 6 хвилин.

Це захист під час подорожей, щоб акумулятор не розряджався випадково. Якщо насадка не підключена, пристрій вимкнеться протягом однієї секунди, і ви не зможете почистити зуби.

4. після використання

Вимкніть ультразвукову зубну щітку. Ретельно промийте головку щітки під проточною водою. Поставте ультразвукову зубну щітку на зарядну станцію, коли індикатор батареї (червоний індикатор) сигналізує про необхідність зарядки.


5. догляд та обслуговування

Прибирання:

Регулярно очищуйте ручку зубної щітки вологою ганчіркою. Головки щітки слід замінювати кожні три місяці або коли помітний знос (відсутність гладкості на зубах).

Зберігання:

Зберігайте зубну щітку в сухому місці, коли вона не використовується.

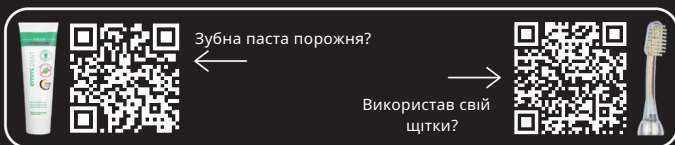

Поради для оптимального догляду за зубами

Використовуйте зубну нитку (emmi® DENT) та ополіскувач для рота (emmi® DENT) на додаток до ультразвукової зубної щітки. Регулярно відвідуйте стоматолога для профілактичних оглядів та професійного чищення зубів.

Головка щітки має такі характеристики:

- Попередній режим збережено (режим 1, 2 або 3)

- Коли потрібно міняти ультразвукову насадку?

Ваша інтелектуальна насадка для ультразвукової зубної щітки запам'ятовує весь період використання та вчасно нагадує вам, коли її потрібно замінити.

Це забезпечує оптимальний догляд за зубами в будь-який час. Зверніть увагу на світлодіодний індикатор на насадці, який повідомляє вам про необхідність її заміни.



- Стабілізує ультразвукову потужність

Активний зв'язок між інтелектуальною насадкою та рукояткою вашої ультразвукової зубної щітки забезпечує стабілізацію коливальних ультразвукових імпульсів.

Ця передова технологія забезпечує рівномірне та ефективне очищення зубів. Переконайтеся, що інтелектуальна насадка правильно розташована на зубному наконечнику, щоб забезпечити оптимальну продуктивність та ефективність вашої зубної щітки.

Дякуємо, що обрали нашу ультразвукову зубну щітку.
Бажаємо вам ретельного та приємного чищення зубів!

Гарантійне обслуговування

Гарантійний термін:

На вашу ультразвукову зубну щітку надається гарантія 2 роки з дати покупки.

Обсяг гарантії: Ця гарантія

поширюється на дефекти матеріалів та виготовлення пристрою. Вона включає двигун та акумулятор.

Не покривається:

Гарантія не поширюється на звичайний знос, пошкодження, спричинені неправильним використанням, аваріями, модифікаціями або несанкціонованим ремонтом.

Гарантійне обслуговування:

У разі гарантійного випадку ми пропонуємо ремонт або заміну приладу.

Передумова для використання:

Щоб подати гарантійну претензію, збережіть чек про покупку та зверніться до нашої служби підтримки клієнтів.

Права споживача: Ця гарантія

не обмежує ваші законні права, а доповнює їх.

© Авторське право належить emmi EMAG AG. Усі права захищено. Вироблено в Німеччині/ЄС. Зміст цієї інструкції з експлуатації захищено авторським правом. Інструкцію з експлуатації не можна копіювати повністю або частково. Зміни, скорочення, розширення та доповнення, а також будь-яка публікація чи переклад третіми особами вимагають попередньої письмової згоди emmi EMAG AG.

emmi[®] ULTRASONIC

Emmi Ultrasonic GmbH • Герардс Втрассе, 34
64546 Moerfelden-Walldorf • Німеччина
Тел. +49 (0)6105 40 67 94 • Факс +49 (0)6105 40 67 81
www.emmi-dent.com • info@emmi-dent.de

